




SUMILON®

細胞培養シャーレ

高品質 & 安定供給

国内生産

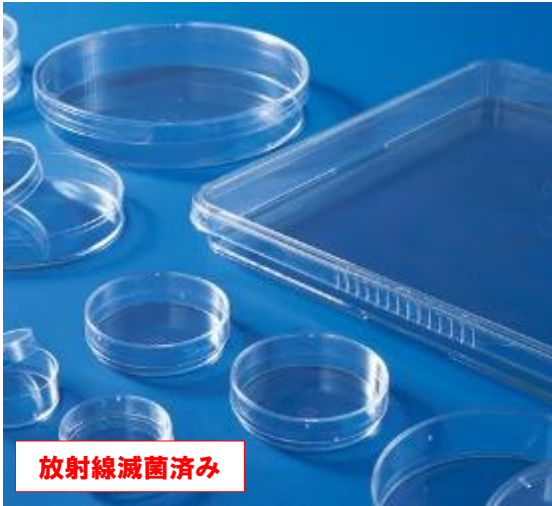


放射線滅菌済み

【特徴】

- ✓ 国産品で高品質の細胞培養用シャーレを安定供給することが可能です。
- ✓ 厳選されたポリスチレン原料を使用し、精密成型技術により培養面の平滑性・均一性に優れています。
- ✓ 少量包装（10個入り）パッケージのため、つねに開封直後のものをお使いいただけます。
- ✓ すべて放射線で滅菌されています。

【シャーレ サイズ一覧】

品番	品名	φa	b	φA	H2	φE
MS-10350	接着細胞培養用シャーレ35（ツバ付）	φ39.4	14.4	33.6	11.8	39.4
MS-11350	接着細胞培養用シャーレ35	φ39.8	14.3	33.8	11.7	-
MS-1135R	浮遊細胞培養用シャーレ35	φ39.8	14.3	33.8	11.7	-
MS-10600	接着細胞培養用シャーレ60	φ57.3	15	52.2	12.5	-
MS-11600	接着細胞培養用シャーレ60	φ57.3	15	52.2	12.5	-
MS-1160R	浮遊細胞培養用シャーレ60	φ57.3	15	52.2	12.5	-
MS-11900	接着細胞培養用シャーレ90（浅型）	φ93	17.3	86.8	13.9	-
MS-13900	接着細胞培養用シャーレ90	φ93	21.5	85.8	17.8	-
MS-1390R	浮遊細胞培養用シャーレ90	φ93	21.5	85.8	17.8	-
MS-10150	接着細胞培養用シャーレ150	φ148.1	27.5	138.7	22.7	-

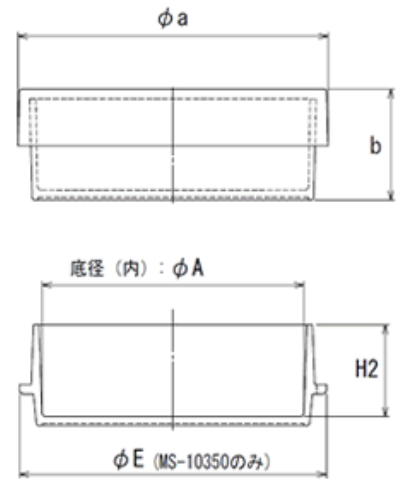

注記

・単位：mm

SUMILON® ここがポイント！！



35mmシャーレ（MS-10350）は持ちやすいツバ付です。



90mmシャーレは高さ20mmと17mmの2種類あります。



60mm・90mmシャーレはフタごと本体をグリップできます。



※詳しい製品情報につきましては、こちらのURL
 またはQRコードにアクセスしてください。
 URL：<http://www.sumibe.co.jp/product/s-bio/cell-culture/cell-culture-dish/index.html>

接着細胞培養シャーレ

全ての製品が **NON Pyrogenic** ※ **放射線滅菌済み** です。

※ NON Pyrogenic : インドクソール®が0.5EU/mL未満であることを確認しています。

- 細胞培養用シャーレじゃ、接着系細胞用の表面処理を施してあり細胞の初期接着性・増殖性に優れています。
- MS-10600は高親水処理を施しており、他の細胞培養シャーレに比べ細胞の伸展がよく、高い増殖性が得られます。

品名	品番	高さ	培養面積	包装 個/包・個/ケース	参考価格	
					単価	ケース価格
接着細胞培養シャーレ35 (ツバ付き)	MS-10350	14mm	9cm ²	10/包・500/ケース	84	42,000
接着細胞培養シャーレ35	MS-11350	14mm	9cm ²	10/包・500/ケース	69	34,500
接着細胞培養シャーレ60 (高親水処理)	MS-10600	15mm	21cm ²	10/包・500/ケース	130	65,000
接着細胞培養シャーレ60	MS-11600	15mm	21cm ²	10/包・500/ケース	77	38,500
接着細胞培養シャーレ90 (浅型)	MS-11900	17mm	57cm ²	12/包・108/ケース	200	21,600
接着細胞培養シャーレ90	MS-13900	20mm	57cm ²	10/包・90/ケース	180	16,200
接着細胞培養シャーレ150	MS-10150	27mm	150cm ²	10/包・100/ケース	520	52,000

価格は全て税抜き価格です。

浮遊細胞培養シャーレ

全ての製品が **NON Pyrogenic** ※ **放射線滅菌済み** です。

※ NON Pyrogenic : インドクソール®が0.5EU/mL未満であることを確認しています。

- 浮遊培養用のシャーレの表面は細胞が接着しにくく、細胞の回収時における細胞へのダメージや損失を最小限におさえます。
- ハイブリドーマやリンパ球の培養、受精卵のドロップ培養など細胞接着を抑制したい場合に有効です。
- LAK養子免疫、遺伝子治療などの研究に適しています。

品名	品番	高さ	培養面積	包装 個/包・個/ケース	参考価格	
					単価	ケース価格
浮遊細胞培養シャーレ35	MS-1135R	14mm	9cm ²	10/包・500/ケース	69	34,500
浮遊細胞培養シャーレ60	MS-1160R	15mm	21cm ²	10/包・500/ケース	77	38,500
浮遊細胞培養シャーレ90	MS-1390R	20mm	57cm ²	10/包・90/ケース	180	16,200
浮遊細胞培養シャーレ150	MS-1015R	27mm	150cm ²	10/包・100/ケース	520	52,000

価格は全て税抜き価格です。

培養用トレイ

全ての製品が **NON Pyrogenic** ※ **放射線滅菌済み** です。

※ NON Pyrogenic : インドクソール®が0.5EU/mL未満であることを確認しています。



- 大容量の静置培養や培養試験に最適で、効率的な培養が可能で、細胞の回収も容易です。
- 安定した積み重ねができます。
- 底面の平滑性、均一性に優れています。
- 細胞産生物の回収や、クローニングに便利です。(セルトレイ)
- cDNAのスクリーニングやコロニーハイブリダイゼーションに便利です。(バイオトレイ)

品名	品番	高さ	培養面積	包装 個/包・個/ケース	参考価格 (税抜)	
					単価	ケース価格
接着細胞培養セルトレイ (245mm角)	MS-12400	25mm	500cm ²	3/包・15/ケース	1,728	25,920
浮遊細胞培養バイオトレイ (245mm角)	MS-12450	25mm	500cm ²	3/包・15/ケース	1,260	18,900

価格は全て税抜き価格です。

住友ベークライト株式会社

- S-バイオ事業部 マーケティング・営業部
- 〒140-0002 東京都品川区東品川2-5-8 天王洲パークサイドビル
- 【東日本エリア】TEL : 03-5462-4831 FAX : 03-5462-4835
- 【西日本エリア】TEL : 06-7669-0031 FAX : 06-7223-8691
- E-mail : s-bio_inquiry@ml.sumibe.co.jp
- URL : http://www.sumibe.co.jp